



VOLARIS Kid Rollatoren sind die neuesten Produkte der Volaris-Familie. Leichte und flexible Indoor-Rollatoren mit Funktionen für die besonderen Ansprüche der Kinder. Mit seinem 50 mm schmalen und 100 mm kürzeren Rahmen sowie den kleineren Rädern macht der Volaris Rollator KID das Manövrieren auf engstem Raum einfacher und bequemer.

KID

Sicherheit:

- Anatomisch geformte Handgriffe „Soft Touch“ korrigieren Handstellung und dämpfen durch „Kraton“-Gummieinsätze (TPE/PVC frei) zusätzlich Vibrationen ab
- verschieden bunte Griffreliefs
- Innen liegendes Bremskonzept, keine außen stehenden Bremszüge

Komfort:

- „Comfort Frame“ – Rahmen für leichte, sichere Führung, verhindert Schlingern und gleicht Unebenheiten aus
- 260 mm große Reifen bieten mehr Sicherheit und Komfort auch in unebenem Gelände



Der Griff lässt sich leicht in der Höhe verstellen und ermöglicht so ein "mitwachsen" auch dient die Höhenverstellbarkeit den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Altersgruppen. Der Rollator ist mit "Smart Handle" ausgestattet. Hierdurch gibt es keine hängenden Drähte, die sich in Dingen verfangen können, sondern alles ist im Rahmen innenliegend eingebaut. Sowohl die Brems- als auch die Feststellbremse sind ergonomisch gestaltet und leicht zugänglich und tragen zu einer hohen Sicherheit bei.



Technische Daten:



	Eigengewicht:	Breite:	Radabstand (längs, Achsenmaß)	Handgriffhöhe verstellbar:	Sitzhöhe verstellbar:	Freiraum Sitz:	Raddurchmesser und Reifenstärke:	Breite zusammengeklappt:	Max. Belastungsgewicht:
S7 CLASSIC 2	6,9 kg	59 cm	74 cm	76 - 102 cm	46 - 60 cm	ca. 41 cm	20 cm 32 mm	27 cm	150 kg
SMART LOW	7,5 kg	59 cm	74 cm	68 - 83 cm	46 - 60 cm	41 cm	20 cm 32 mm	27 cm	150 kg
SMART WIDE	7,8 kg	65 cm	74 cm	76 - 102 cm	46 - 60 cm	48 cm	20 cm 32 mm	27 cm	150 kg
SMART WIDE LOW	7,5 kg	65 cm	74 cm	68 - 83 cm	46 - 50 cm	48 cm	20 cm 32 mm	27 cm	150 kg
S7 HP	7,5 kg	59 cm	74 cm	76 - 102 cm	46 - 60 cm	ca. 41 cm	20 cm 32 mm	27 cm	150 kg
PATROL	8,7 kg	59 cm + 6 cm	84 cm	81 - 107 cm	51 - 65 cm	ca. 40,5 cm + 6 cm	26 cm 34 mm	27 cm	160 kg
PATROL WIDE	9,2 kg	65 cm	84 cm	81 - 107 cm	51 - 65 cm	48 cm	26 cm 34 mm	27 cm	160 kg
COMPACT	7,2 kg	53 cm	62 cm	73 - 88 cm	43 - 57 cm	ca. 36 cm	15 cm 32 mm	27 cm	140 kg
COMPACT LOW	6,9 kg	53 cm	62 cm	63 - 79 cm	43 - 57 cm	ca. 36 cm	15 cm 32 mm	27 cm	140 kg
S7 RA	12 kg	65 cm	80 cm	100 - 125 cm	46 - 57 cm	48 cm	20 cm 32 mm	29 cm	125 kg
S7 RA LOW	11,9 kg	65 cm	80 cm	88 - 114 cm	46 - 57 cm	48 cm	20 cm 32 mm	29 cm	125 kg
KID	6,5 kg	53 cm	62 cm	58 - 70 cm	42 cm	36 cm	15 cm 32 mm	27 cm	60 kg



ENTDECKEN SIE DIE LEICHTIGKEIT

PRESENTED BY



RA

RA mit Unterarmauflage, wenn Sie eine besondere Stütze benötigen.

Funktionalität:

- Einfach und platzsparend zusammenlegbar
- Sitzhöhe und Armgriffe ohne Werkzeug und Verschraubung höhenverstellbar
- Lauf- und Feststellbremsen einfach und intuitiv bedienbar



Umfangreiches Zubehör bietet noch mehr Vielseitigkeit.



mehr Infos auf unserer Internet-Seite



S7 Classic 2

Besonders **leichter & robuster** Aluminium Rollator für den besonderen Anspruch.

Der VOLARIS S7 Classic 2 ist für uns UNSCHLAGBAR - er ist unser Multitalent!

- Mit beweglichem Rahmen, ideal auch auf unebenen Wegen
- Mit fester höhenverstellbarer Kunststoffsitze
- Mit Arretierung im gefalteten Zustand
- In den Griff integrierte Bremsen
- Sichere Parkbremse
- Inklusive Ankipphilfe
- Comfort Frame™



PRAKTISCH FÜR DEN EINKAUF
Netzkorb oder Metallkorb inklusive

Hilfsmittelverzeichnis
Nummer:
10.50.04.1151



PATROL

Der Volaris PATROL bietet Ihnen:

Sicherheit:

- Anatomisch geformte Handgriffe „Soft Touch“ korrigieren Handstellung und dämpfen durch „Kraton“-Gummieinsätze (TPE/PVC frei) zusätzlich Vibrationen ab
- Griffreliefs an den Fingern
- Innen liegendes Bremskonzept, keine außen stehenden Bremszüge


Komfort:

- „Comfort Frame“ – Rahmen für leichte, sichere Führung, verhindert Schlingern und gleicht Unebenheiten aus
- 260 mm große Reifen bieten mehr Sicherheit und Komfort auch in unebenem Gelände
- Umfangreiches Zubehör
- Bis 150 kg belastbar
- Geringes Eigengewicht von 8,7 kg



AUCH IN XL VERSION

PRAKTISCH FÜR DEN EINKAUF
Netzkorb oder Metallkorb inklusive

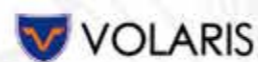

S7 Classic HP

Der Volaris S7 HP ist ein **Leichtgewichts-Rollator** aus Aluminium **speziell für Schlaganfall Patienten**.

Er besitzt einen Spezialhandgriff aus weichem Schaumstoff für die beeinträchtigte Körperseite. Dieser kann individuell in Höhe und Winkel angepasst werden.

Auf der anderen Seite befindet sich ein Handgriff mit ergonomischen Profil für die aktive Körperhälfte. Hier ist auch die Einhandbremse montiert über die beide Hinterräder mit geringem Kraftaufwand gleichzeitig gebremst werden.

- wartungsfreies Bremssystem
- steht im zusammengeklappten Zustand
- verschiedene Sitzhöhen an einem Rollator einstellbar
- extrem leicht
- pannensichere Bereifung
- Comfort Frame™

PRAKTISCH FÜR DEN EINKAUF
Netzkorb inklusive



COMPACT

Der Volaris COMPACT ist **leicht & flexibel** - durch den nur 50 cm schmalen Rahmen sind Manöver in **engsten Räumen** kein Problem. Auch für den Außenbereich. Der spezielle „Comfort Frame“ ermöglicht eine stabile Nutzung auch auf unebenen Flächen.



Dieser Rollator verfügt über **innenliegende Bremszüge** und ist recyclebar. Er erfüllt den Standard ISO11199-2:2005 (ausser bei Raddurchmesser)



ELCHTEC

BARRIEREFREI . AKTIV . MOBIL .

ELCHTEC

by

Volaris Deutschland GmbH
Geschäftsführer: Michael Schmitz

Druckerweg 4
D-51789 Lindlar

Aus Deutschland : 02266 479 43 00

Aus Österreich : 0049 2266 479 43 00

Email: info@volaris-online.de

Internet: www.elchtec.de

Ihr Fachhändler

www.elchtec.de